


OMRON

Máy massage xung điện trị liệu

HV-F013

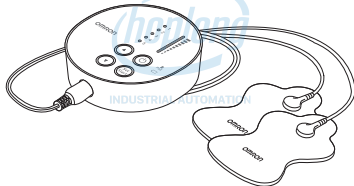

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

Liệu pháp trị liệu bằng xung điện tại nhà đơn giản hơn

Nhỏ gọn

Dễ sử dụng


- 4 nút
- 2 bước
- Chọn chế độ
- Chọn cường độ



Đủ năng suất trị liệu cho nhiều cơn đau


- 5 chế độ
- 10 cường độ khác nhau

BƯỚC 1

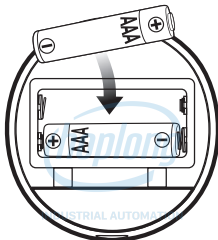


Tắt máy. Lắp pin


Đọc kỹ toàn bộ hướng dẫn sử dụng để đảm bảo an toàn và sử dụng đúng máy xung điện trị liệu này

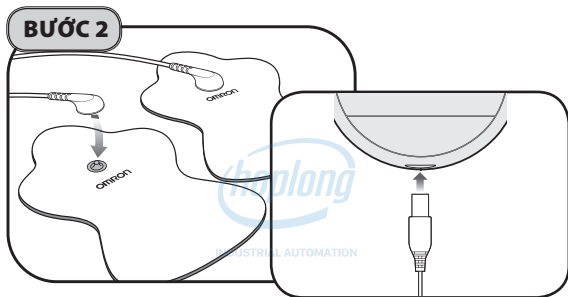


Cắm dây vào phần bên dưới của máy và mỗi đầu dây còn lại được gắn với một miếng dán.

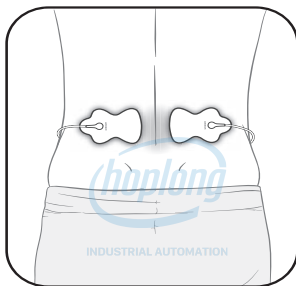BƯỚC 3


Kiểm soát và đánh giá mức đau trước và sau trị liệu (1à mức đau nhẹ đến 10 mức đau nhất). Đặt 2 miếng dán cách chỗ đau ít nhất 2,5cm. Không xếp chồng lên nhau. Để miếng dán trên vùng da sạch, khô và không bị thương tổn.

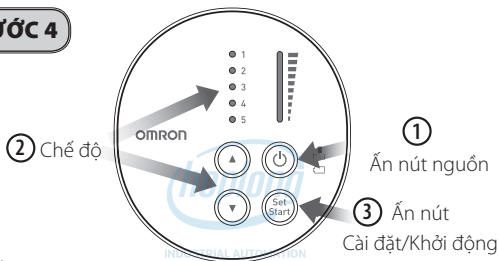BƯỚC 4

- ① Ấn nút nguồn
- ② Ấn ▲(lên) hoặc ▼(xuống) để chọn 1 trong 5 chế độ
Không kết hợp được các chế độ với nhau.
- ③ Ấn nút Set Start (Cài đặt / Khởi động) để chọn chế độ.
Máy sẽ bắt đầu liệu trình tại mức cường độ 1.

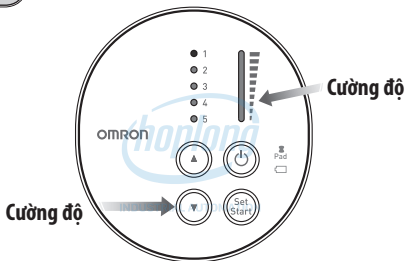BƯỚC 5

Ấn nút ▲(lên) để tăng cường độ. Thiết lập cường độ cho cơn đau của bạn. Có đến 10 cường độ khác nhau

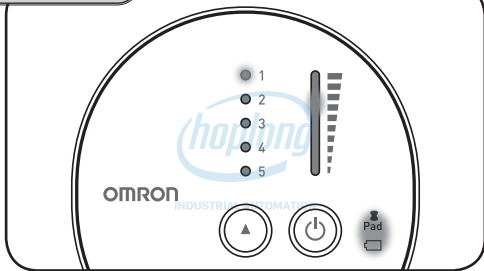ĐÈN DỄ ĐỌC

Đèn chế độ được chọn sẽ sáng, đèn cường độ massage sáng, đèn pin yếu sáng, đèn miếng dán nhấp nháy nếu (các) miếng dán rơi ra.

Bạn thấy thế nào?

Thiết kế 3 chế độ để giảm đau tại các vùng cụ thể. Thiết kế 2 chế độ massage để thư giãn cơ bắp. **Bạn có thể chỉ sử dụng 1 chế độ tại một thời điểm.** Cài đặt trước các chế độ khác nhau cho cảm giác massage khác nhau như vỗ nhẹ, râm ran hoặc thậm chí là co bóp cơ nhẹ.

Tùy chỉnh chế độ trị liệu

1. Chọn chế độ
2. Chọn cường độ:

INDUSTRIAL AUTOMATION

Luôn khởi động với cường độ thấp và tăng dần. Nếu không có cảm giác thoải mái, giảm cường độ và/hoặc thay đổi chế độ. Nếu cảm giác này yếu đi hoặc biến mất, tăng cường độ. Nếu dùng chung máy massage xung điện này, mỗi người sẽ sử dụng riêng các miếng dán để phòng tránh lây chéo.

Kiểm soát cơn đau của bạn ít nhất là 15 phút

1 lần điều trị

**Tự động tắt sau 15 phút
trị liệu**

**Thời gian trị liệu tối đa cho 1
lần trong 1 vùng đau**

30 phút cho 2 lần trị liệu

**Số lần điều trị tối đa trong
một ngày cho một vùng đau**

**3 lần trong 1 ngày
(30 phút x 3 lần)**

Bắt đầu với một lần massage kéo dài 15 phút.

Luôn tắt máy khi miếng dán vẫn còn dính.

Dừng trị liệu nếu cơn đau giảm hoặc không còn đau. Ấn nút Nguồn để tiếp tục trị liệu thêm 15 phút.


Miếng dán dễ vệ sinh và sử dụng được nhiều lần

Thử nghiệm chứng minh rằng mỗi miếng dán sử dụng được đến 150 lần. Dùng nước xả dưới vòi để rửa sau 15 lần dùng. Để khô ngoài không khí trước khi bảo quản.



Cách bảo quản miếng dán

Để bảo quản miếng dán, đặt mặt dính của miếng dán vào mỗi mặt của phần giữ miếng dán màu trắng. Bọc dây xung quanh.

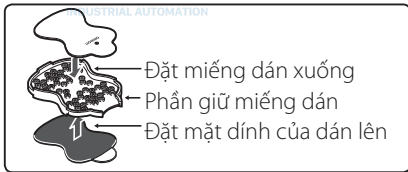

Hướng dẫn đặt miếng dán (để trị liệu tối ưu)

Đặt các miếng dán trên mỗi phía bị đau.

Phải sử dụng HAI MIẾNG DÁN.

Đặt các miếng dán cách chỗ đau ít nhất 2,5cm.

Không xếp chồng các miếng dán.

Không xịt, bôi thuốc hoặc kem lên da hoặc miếng dán.

Không dùng chung miếng dán

Không di chuyển miếng dán sang vị trí khác khi máy vẫn bật

Tùy chỉnh với 5 chế độ

Mỗi chế độ có thể sử dụng cho bất kỳ chỗ đau nào
Sử dụng bất kỳ chế độ nào làm bạn dễ chịu



Tay/Vai




Phần lưng dưới




Xoa bóp



Ổ định

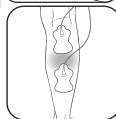


Chân/Bàn chân

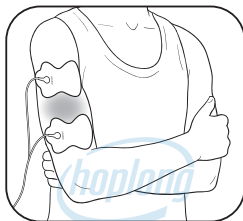

INDUSTRIAL AUTOMATION
TAY




KHÔNG sử dụng với một thiết bị y tế được cấy ghép hoặc gắn vào, hoặc trên trẻ em, người mang thai, người không có khả năng biểu lộ cảm xúc hoặc người không thể tự vận hành được máy này.

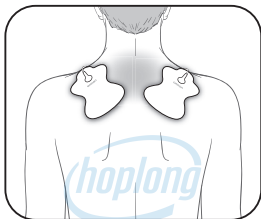

INDUSTRIAL AUTOMATION
VAI





KHÔNG sử dụng trên đầu, mặt, miệng, cổ, cổ họng, vết thương hở, vùng da phát ban, nổi mụn, vùng thương tổn bị ung thư hoặc vùng da không có cảm giác bình thường.

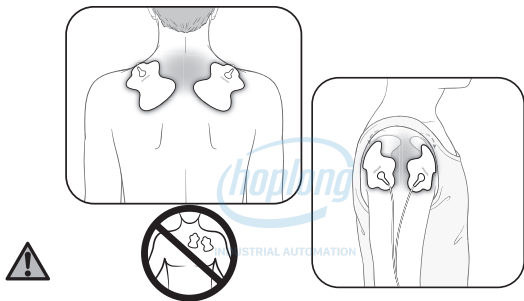


VAI


KHÔNG đặt các miếng dán trên vùng ngực hoặc gần tim.

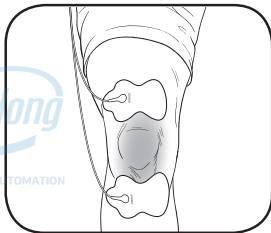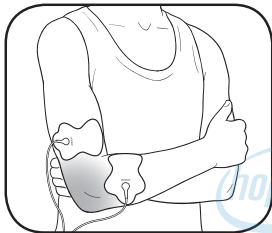

KHỚP XƯƠNG

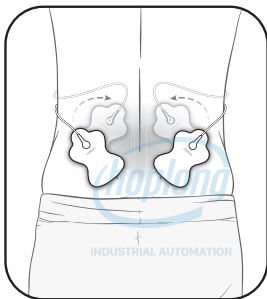


PHẦN LƯNG DƯỚI

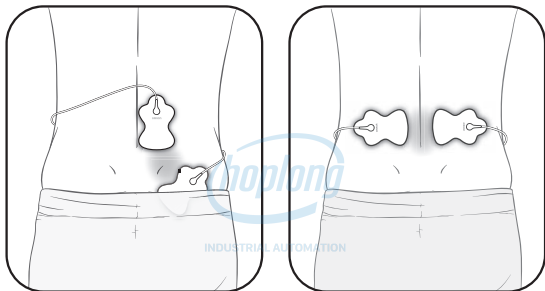


PHẦN LƯNG DƯỚI

Đặt các miếng dán trên cơ lưng, chứ không phải cột sống để đảm bảo trị liệu tối ưu.

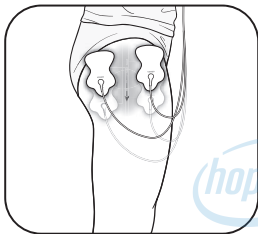


PHẦN LƯNG DƯỚI

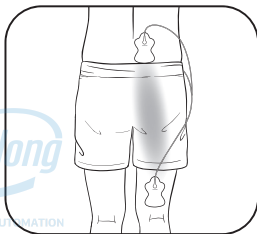

CHÂN (HÔNG/BẮP ĐÙI)


Đặt các miếng dán cách nhau ít nhất 2,5cm.

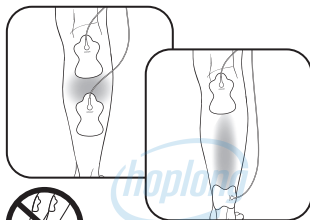

CHÂN (BẮP CHÂN)

KHÔNG đặt các miếng dán trên các bắp chân của cả hai bên cùng một lúc.

Lông chân có thể làm giảm khả năng dính của miếng dán.
Nên cạo lông chân trước khi đặt miếng dán.

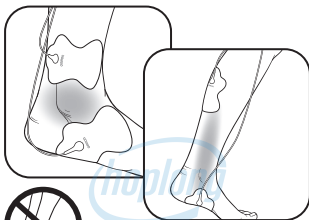

CHÂN (MẮT CÁ CHÂN)



KHÔNG đặt các miếng dán dưới lòng bàn chân của cả hai bên cùng một lúc.



INDUSTRIAL AUTOMATION

Omron chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe như: Máy đo huyết áp, Máy đo đường huyết, Máy xông mũi họng, Nhiệt kế điện tử, Máy massage, Cân sức khỏe, Máy đo lượng mỡ cơ thể,... sử dụng chuyên dụng trong bệnh viện, cũng như trong gia đình. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.



OMRON HEALTHCARE CO., LTD., JAPAN

VPĐD OMRON HÀ NỘI:

Tầng 6, tòa nhà 789, 147 Hoàng Quốc Việt,
P.Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
ĐT: (024) 3556 0025

VPĐD OMRON HỒ CHÍ MINH:

Tầng 5, tòa nhà E.Town Central
11 Đoàn Văn Bơ, P.12, Q. 4, TP.HCM
ĐT: (028) 3636 7238



Omron Healthcare Vietnam

Website: www.omron-yte.com.vn